

# CAMEO<sup>®</sup> DISK シルバー及びゴールド



CAMEO DISKシルバー及びゴールドは、BioDiamontリキッドを研磨媒体として使用する高い研磨力を持ったラッピングディスクです。柔らかい物から非常に硬い物まで精密に研磨する事が可能です。

扱いやすく、ディスク1枚でBioDiamantリキッドの粒径を変える事によって240-4000番の耐水研磨紙の研磨工程に置き換える事ができる為、コスト面でも非常に効果的に利用できます。

## ● 材料特性

### CAMEO DISKシルバー

中硬質から超硬質の材料向け研磨ディスクです。  
(> 200 HV)

12-6 $\mu$ mのBioDiamantリキッドと共に利用下さい。


### CAMEO DISKゴールド

軟質、非鉄材料向け研磨ディスクです。

12-3 $\mu$ mのBioDiamantリキッドと共に利用下さい。

## ● 使用方法

マグネット式研磨盤の上に乗せてBioDiamantリキッドを一定の間隔で滴下しながら研磨します。使用後はディスク表面を維持する為に流水で洗浄した後に、乾燥させる事を推奨しております。

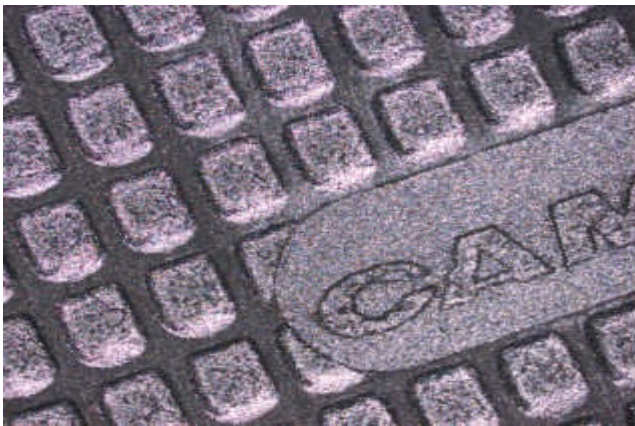

製品番号	製品名称	サイズ	枚数
66005722	CAMEO DISK シルバー	200	2枚1セット
66005724	CAMEO DISK シルバー	250	2枚1セット
66005725	CAMEO DISK シルバー	300	2枚1セット
66005730	CAMEO DISK ゴールド	200	2枚1セット
66005732	CAMEO DISK ゴールド	250	2枚1セット
66005733	CAMEO DISK ゴールド	300	2枚1セット

## 販売元:ケメット・ジャパン株式会社

〒261-7121 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6WBGマリブウエスト21階

TEL:043-213-9911 FAX:043-213-9932

メール:[info@kemet.jp](mailto:info@kemet.jp) URL:<http://www.kemet.jp/>

イプロス :<http://premium.ipros.jp/kemet>